


IVISKIN

IVISKIN G4 IPL Haarentferner




BENUTZERHANDBUCH

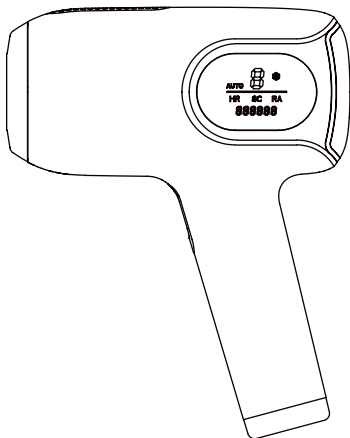



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das
Gerät verwende.

Inhaltsübersicht

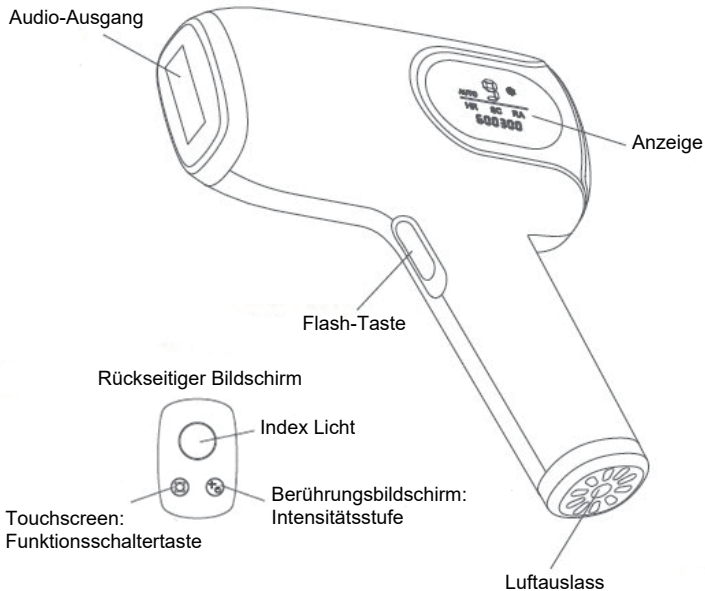1. Beschreibung der Tasten und der Anzeige.....	S. 4
2. Vor der Benutzung des Gerätes.....	S. 6
3. Sicherheitsmaßnahmen.....	S. 6
4. Das Produkt ist nicht geeignet für.....	S. 8
5. Wo kann das Gerät verwendet werden?.....	S. 9
6. Vermeiden Sie die Verwendung von IPL am.....	S. 10
7. Vor Gebrauch testen.....	S. 10
8. Erste Schritte.....	S. 10
9. Anleitung.....	S. 11
10. Einstellungen für Lichteffekte.....	S.12
11. Sonneneinstrahlung während der Behandlung.....	S.13
12. Fehlerbehebung.....	S. 14

1. Beschreibung der Tasten und der Anzeige:



LCD-Bildschirm	Funktion
HR	Haarentfernung
SC	Hautverjüngung
RA	Pickel
	IceShield
AUTO	Automatischer Lichtmodus
Stufe 1- 9	Lichtintensität
Sechs Ziffern	Verbleibende Anzahl von Lichtblitzen
 	Funktionsschaltertaste, vorhanden in „HR“. Schaltet zwischen „SC“, „RA“ und „Iceshield“ um. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
	Drücken Sie die Taste einmal, um die Intensität zu wechseln. Es können bis zu 9 Stufen eingestellt werden.

2. Vor der Verwendung des Geräts:

Überprüfen Sie Ihren Hauttyp, wie Sie auf dem Bild zur Kontrolle der Hautfarbe unten sehen können. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie dunkle Haut haben. Es kann zu Nebenwirkungen in der Haut führen, wie Pigmentierung und Depigmentierung, starke Rötung und Schwellung oder Brennen.



3. Sicherheitsmaßnahmen:

Diese Sicherheitsmaßnahmen sind allgemeine Empfehlungen für den sicheren Einsatz der IPL-Technologie zu Hause. Sie sind nicht einzigartig in unserem Modell, sondern bewährte Verfahren, die dazu beitragen, eine sichere und wirksame Behandlung zu gewährleisten.

- Tragen Sie vor dem Gebrauch keine Creme oder Pflegeprodukte auf, da Cremes die Haarfollikel verstopfen sodass das Licht nicht ganz nach unten reicht oder eine Reaktion hervorruft.
- Nicht in der Badewanne, Dusche oder in Kontakt mit Wasser verwenden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Wenn die Haut im zu behandelnden Bereich nicht trocken oder sauber ist, beeinträchtigt dies den Gebrauchseffekt, der dazu führen kann, dass das Produkt nicht oder versehentlich blinkt.
- Wir empfehlen, dass alle Benutzer unserer IPL-Haarentferner 18 Jahre oder älter sind. Sind Sie unter 18 Jahren müssen Sie die Zustimmung Ihrer Eltern haben.
- Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind und empfindliche Haut haben, wenden Sie

- sich an Ihren Arzt, um Rat zu erhalten, ob Sie es verwenden können IPL.
- Bitte überprüfen Sie das Blitzfenster regelmäßig auf Verschmutzungen, um Verbrennungen und Fehler während des Gebrauchs.
 - Blockieren Sie die Entlüftung nicht, wenn Sie sie benutzen, da dies Rauch und Feuer verursachen kann.
 - Bitte stellen Sie die Stärke entsprechend Ihrem Hauttyp ein. Kontrollpunkt Nr. 8 wie man loslegt.
 - Wenn nach der Behandlung Anzeichen von Hautreizungen oder Rötungen auftreten, beenden Sie die Anwendung von Produkten auf Ihrer Haut, bis die Symptome nachlassen. Wenn die Reizung nach der Verwendung eines Produkts anhält, reinigen Sie es sofort mit Wasser. Wenn die Symptome anhalten, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und konsultieren Sie ein medizinisches Fachpersonal.
 - Dieses Produkt sollte nur in Übereinstimmung mit seinem vorgesehenen Zweck verwendet werden. Befolgen Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind. Unsachgemäße Verwendung kann zu Unfällen wie Stromschlägen, Verbrennungen oder anderen damit verbundenen Verletzungen führen.
 - Die Verwendung von intensiv gepulstem Licht zur Haarentfernung kann bei manchen Menschen zum Gegenteiligen Effekt führen, nämlich vermehrtes Haarwachstum. Nach aktueller Forschung sind Frauen aus Mittelmeerländern, dem Nahen Osten und Südasien, die in der Gesichtsregion behandelt werden, besonders gefährdet. Das Phänomen wird als „paradoxe Hypertrichose“ oder „paradoxes Haarwachstum“ bezeichnet und ist selten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Menschen mit dunklerer Haut unabhängig vom Gerätetyp andere Ergebnisse und mögliche Nebenwirkungen haben können als Menschen mit hellerer Haut.

- Hautreizungen durch Aktivitäten wie Rasieren oder andere Dinge sollten vor dem Gebrauch des Geräts abheilen.
- Verwenden Sie während der Behandlung keine Selbstbräunungscreme oder irgendeine Form von Selbstbräunung.
- Eine gründliche Rasur wird am meisten empfohlen. Ziel ist es, dass die Lichtenergie Follikel so schnell wie möglich erreicht, daher ist eine vorherige Rasur unerlässlich, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Sie können Wachsen, Zupfen oder Epilieren durchführen, aber dann müssen Sie 24 Stunden warten, bevor Sie eine Behandlung mit IPL durchführen.
- Dieses Tool ist nicht für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten geeignet, es sei denn, sie erhalten eine Anleitung von einer Person mit der notwendiger Erfahrung.
- Die Interaktion von Kindern mit dem Gerät sollte überwacht werden, um mögliche Risiken wie Lichteinwirkung, elektrische Gefahren oder potenzielle Gefahren im Zusammenhang mit den Komponenten des Geräts zu vermeiden.
- Halten Sie sich für optimale Ergebnisse an die empfohlene Behandlungshäufigkeit. Eine übermäßige Anwendung zu einem frühen Zeitpunkt kann das Risiko von Nebenwirkungen auf der Haut verschlimmern.
- Wenn Sie nach der Haarentfernung eine plastische Operation benötigen (nur in dem Bereich, den Sie entfernt haben haare) müssen Sie Ihren Arzt konsultieren.
- Wenn Sie sich nach der Anwendung krank oder unwohl fühlen, wenden Sie sich an einen Arzt.
- Wir empfehlen, während der Behandlung die mitgelieferte Schutzbrille zu verwenden.

4. Das Produkt ist nicht geeignet für:

- Schwangere, stillende Frauen, Körpernarben, Diabetes, empfindliche Haut

und lichtempfindliche Haut.

- Schwere Herzkrankheit, mittelschwerer bis schwerer Bluthochdruck, maligne Tumoren, Follikulitis, infektiöse Hauterkrankungen, verbrannte Haut und Gerinnungsstörungen.
- Nicht verwenden, wenn Sie einen abnormalen Kollagenstoffwechsel haben, einschließlich einer Vorgeschichte mit Narben und schlechter Wundheilung.
- Patienten mit Gefäßerkrankungen wie Krampfadern an der Bestrahlungsstelle.
- Patienten mit Herpes-simplex-Ausbrüchen, Hautläsionen und Hämatomen dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Menschen mit Immunkrankheiten (einschließlich HIV, Porphyrie usw.) dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Patienten mit einer Blutungsstörung und Patienten, die Isotretinoin, Fruchtsäure (AHA), Salicylsäure (BHA) oder Azaleasäure verwenden, dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht, wenn Sie in den letzten 30 Tagen eine chemische Haarentfernung durchgeführt haben. Dies gilt auch für diejenigen, die kürzlich Hautaufhellungsprodukte oder Produkte mit Vitamin-A-Inhaltsstoffen verwendet haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Aspirin, Immunsuppressiva und andere Medikamente eingenommen haben.

5. Wo kann das Gerät verwendet werden?

IVISKIN IPL Haarentferner kann am ganzen Körper verwendet werden, solange er sich unterhalb der Nasenspitze befindet! Dies ist eine Empfehlung, da wir möchten, dass alle darauf achten, während der Behandlung kein IPL direkt in die Augen zu bekommen.

Was den Boden betrifft, kann es bei Frauen auf brasilianische Weise verwendet

werden, aber vermeiden Sie es, den Anus, die Schleimhäute und die inneren Schamlippen zu behandeln. Bei Männern empfehlen wir, Penis und Hodensack nicht zu behandeln. Die Umgebung kann behandelt werden.

6. Vermeiden Sie die Verwendung von IPL an folgenden Körperstellen:

1. Der Augapfel, die Augenlider und um die Augen herum
2. Schleimhäute und Anus
3. Bereiche mit Akne
4. Tattoos
5. Augenbrauen
6. Ohr
7. Brustwarze, Warzenhof
8. Im Nabel
9. Große Venen

(Hinweis: Diese Liste ist nicht erschöpfend. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Produkt verwenden können, empfehlen wir Ihnen, einen Arzt aufzusuchen).

7. Vor Gebrauch testen:

Es wird empfohlen, vor dem Gebrauch einen Test durchzuführen.

Testmethode:

Es wird empfohlen, 24 Stunden vor der ersten Behandlung einen Hauttest durchzuführen, um Nebenwirkungen oder Reaktionen festzustellen. Testen Sie auf einer kleinen Hautstelle an der Innenseite des Oberarms einmal mit Stärke 1 und einmal mit Stärke 5. Wenn Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden Rötungen, Verbrennungen, stechende Schmerzen oder andere Symptome bemerken, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie es erneut anwenden.

8. Erste Schritte und Verwendung der IPL-Haarentfernung:

Bitte entfernen Sie zuerst die Haare von der Haut durch Rasieren. Wenn Sie Wachsen, Zupfen oder Epilieren durchführen, müssen Sie 24 Stunden warten, bevor Sie eine Behandlung mit IPL durchführen. Die Haut muss vollständig trocken und frei von Ölen und Cremes sein. Geben Sie nur einen Lichtimpuls pro Standort ab. Es besteht keine Notwendigkeit für mehrere Blitze an der gleichen Stelle.

Stellen Sie die richtige Stärke ein:

Die Skala der Stufen reicht von 1 bis 9, wobei 1 niedrig und 9 hoch ist. Wenn Sie dies zum ersten Mal ausprobieren, beginnen Sie mit Stufe 1. Wenn Sie sich an den Vorgang gewöhnt haben, können Sie die Stärke langsam Woche für Woche erhöhen, aber nur, wenn dies keine Schmerzen während der Behandlung verursacht.

Wir empfehlen Ihnen, alle Bereiche abzudecken, die Sie behandeln möchten, und das Behandlungsfenster in der Nähe des zuvor behandelten Bereichs zu platzieren. Dies dient dazu, die besten Ergebnisse zu erzielen.

Menschen mit dunkler Haut sollten bei der Anwendung einer IPL-Behandlung (Intense Pulsed Light) Vorsicht walten lassen. Es wird empfohlen, entweder die Anwendung zu vermeiden oder eine geringere Stärke zu wählen, um das Risiko von Nebenwirkungen wie Hautreizungen, Rötungen und Hyperpigmentierung zu verringern. Wenn Sie nach einer Behandlung Veränderungen der Hautfarbe beobachten, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.

9. Anleitung:

1. Schließen Sie den Stromadapter an, schalten Sie das Gerät ein und verwenden Sie die mitgelieferte Schutzbrille. Der Bildschirm des Geräts

- leuchtet auf, und der Anzeigezustand ist „OFF“.
2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet und bestätigt den aktuellen Betriebsstatus auf dem Bildschirm.
 3. Drücken Sie die Taste „Funktionsschalter“. Wenn auf dem Bildschirm HR angezeigt wird, wechselt das Gerät in den Haarentfernungsmodus.
 4. Das Gerät verfügt über 9 Stufen. Drücken Sie kurz auf den Stufenschalter, um die Intensität der Lichtwellen einzustellen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, beginnen Sie bitte mit Stufe 1.
 5. Drücken Sie nach dem Gebrauch 2 Sekunden lang die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie keine weitere Tätigkeit mit dem Gerät ausführen, schaltet es sich nach fünf Minuten automatisch aus.

10. Einstellungen für den Lichteffect:

- Manueller Modus (geeignet für die Haarentfernung auf kleinen Flächen). Wenn das Gerät eingeschaltet wird, startet es standardmäßig im manuellen Modus. Drücken Sie einmal auf die Blitztaste, um einmal Licht zu emittieren.
- Automatischer Modus (für die Haarentfernung auf großen Flächen). Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Blitztaste und halten Sie sie gedrückt. Das Gerät schaltet in den Automatikmodus und „AUTO“ auf dem Bildschirm blinkt. Wenn Sie das Blitzlichtfenster nahe an die Haut halten, blinkt das Gerät automatisch.
 - IceShield-Funktion: Drücken Sie die „Funktionsschalttaste“. Auf dem Bildschirm erscheint ein Schneeflocken-Symbol, was bedeutet, dass die Kühlfunktion aktiviert ist.
 - Haarentfernung, Hauterneuerung und Aknebehandlung: Drücken Sie die Taste „Funktionsschalter“. Auf dem Bildschirm wird abwechselnd HR, SC und RA angezeigt.

Empfohlene Behandlung:

IPL wird einmal pro Woche für 12 Wochen angewendet. Bereits nach 4 Wochen werden Sie einen Unterschied bemerken.

Nach 12 Wochen werden Sie entweder mit dem Ergebnis zufrieden sein und in die Nachbehandlungsphase übergehen oder die Behandlung fortsetzen - dies ist von Person zu Person unterschiedlich. Wenn Sie die Behandlung fortsetzen, machen Sie dies einmal pro Woche, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.

Die Nachbehandlungsphase:

Sie erhalten Ihr Ergebnis, indem Sie IPL einmal alle zwei Monate nach Abschluss der Behandlung anwenden.

11. Sonneneinwirkung während der Behandlung:

- Wir empfehlen, 48 Stunden zu warten, bevor Sie nach der Behandlung ein Sonnenbad nehmen.

Wenn Sie während der Behandlung einen Sonnenbrand bekommen, müssen Sie warten, bis er abgeklungen ist, bevor Sie den IPL-Haarentferner verwenden. Denken Sie daran, Ihre Haut immer mit einem Sonnenschutzmittel zu schützen! Verwenden Sie 48 Stunden nach der Anwendung LSF 50+ auf den behandelten Stellen und dann zwei Wochen danach LSF 30+.

- Vermeiden Sie Solarien während der Behandlungszeit.
- Nach dem Bräunen müssen Sie zwei Wochen warten, bevor Sie den IPL-Haarentferner von Iviskin verwenden.

Dann müssen Sie 24 Stunden vor Beginn der Behandlung einen Test durchführen. Siehe Punkt 7. „Vor Gebrauch testen“. Wenn Sie das Produkt

entsorgen, werfen Sie es nicht in den Hausmüll. Geben Sie es bei einer Sammelstelle ab. Das ist wichtig für die Umwelt und für uns.

12. Fehlerbehebung:

Dieser Abschnitt enthält die häufigsten Probleme, die bei der Verwendung dieses Geräts auftreten können. Wenn Sie das Problem mit diesen Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

<u>Problembeschreibung:</u>	<u>Mögliche Ursachen:</u>	<u>Lösung:</u>
Das Ladegerät oder das Gerät wird während des Gebrauchs heiß.	Das ist normal.	Sie brauchen sich um nichts zu kümmern.
Ich lege das Haarentfernungsgerät auf die Haut und die Nummer blinkt, aber der Kühlventilator beginnt zu fahren.	Der Schutz vor Überhitzung ist aktiviert.	Wenn der Überhitzungsschutz beginnt, läuft der Lüfter weiter. Nicht von der Strömung treffen. Bitte warten Sie, bis das Gerät in 15 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie mit der Verwendung fortfahren.
Das Gerät blinkt nicht, wenn die Blitztaste gedrückt wird.	Das Gerät muss zurückgesetzt werden.	Setzen Sie das Gerät durch Schrauben von Ein- und Aus zurück.
Erhöhung oder Verminderung des der Intensitätsstufe funktioniert nicht.	Das Gerät muss zurückgesetzt werden.	Setzen Sie das Gerät durch Schrauben von Ein- und Aus zurück.
Es riecht schlecht, wenn ich das Gerät benutze.	Zubehör und Filter sind zu verschmutzt. Bitte waschen Sie das Zubehör sorgfältig. Die Haare werden von der Behandlungsstelle nicht gut genug entfernt. Diese Haare können brennen und einen schlechten Geruch hervorrufen.	Bitte entfernen Sie die Haare auf der Hautoberfläche vor Gebrauch des Geräts.
Während der Behandlung fühlt sich die Haut empfindlicher als normale an, unerträgliche Schmerzen, wenn ich das Gerät verwende.	Die von Ihnen gewählte Lichtintensität ist zu hoch.	Bitte achten Sie darauf, dass die richtige Lichtstärke gewählt wird. Niedrigere Intensität, falls erforderlich.

Während der Behandlung fühlt sich die Haut empfindlicher als normale an, unerträgliche Schmerzen, wenn ich das Gerät verwende.	Du hast nicht alle Haare am Behandlungsort entfernt.	Bitte entfernen Sie die Haare auf der Behandlungsstelle vor Gebrauch des Geräts.
	Der Ultraviolettfiter am Ausgang ist verletzt	Wenn der UV-Filter beschädigt ist, müssen Sie das Gerät nicht weiter verwenden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Während der Behandlung fühlt sich die Haut empfindlicher als normale an, unerträgliche Schmerzen, wenn ich das Gerät verwende.	Sie haben das Gerät am falschen Ort verwendet.	Verwenden Sie dieses Gerät nicht in den folgenden Bereiche: die Brustwarze, areola, Schamlippen, Vagina, Anus, sowie die Innenseite der Nasenlöcher und Ohren. Männer sollten das Gerät nicht im Gesicht oder Hals verwenden.
	Das Gerät ist nicht für Ihren Hauttyp geeignet.	Wenn der Hauttyp VI ist, braunschwarz oder sehr dunkel bitte nicht dieses Gerät verwenden.
Die Reaktion der Haut dauerte länger als normal nach der Behandlung.	Die von Ihnen gewählte Lichtintensität ist zu hoch.	Bitte wählen Sie eine niedrigere Lichtintensität beim nächsten Mal aus.
	Die von Ihnen gewählte Lichtintensität ist zu niedrig.	Bitte wählen Sie eine höhere Lichtintensität beim nächsten Mal aus.
	Das Gerät hat keinen Einfluss auf die Haarfarbe.	Sie müssen alle Haare entfernen. Es wird empfohlen, dass Sie das empfohlene Behandlungsverfahren befolgen.
	Die Reaktion Ihres Körpers auf IPL Die Verarbeitung kann langsam sein.	Benutzen Sie das Gerät noch mindestens sechs Monate, weil die Haare wollen in dieser Zeit wieder wachsen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, schauen Sie bitte in unserem Blog nach oder besuchen Sie unsere FAQ-Seite, die Sie beide auf unserer Website finden. Unser Kundendienstteam steht Ihnen von Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr per E-Mail, um Ihre Anfragen zu bearbeiten, zur Verfügung. Sie können uns auch über den Live-Chat erreichen oder das Kontaktformular auf unserer Webseite ausfüllen.

Wenn Sie das Produkt entsorgen, entsorgen Sie es nicht im Restmüll. Bring es zu einer Umweltstation zurück. Das ist wichtig für die Umwelt und für uns.

WIE MAN IVISKIN IPL HAARENTFERNER ANWENDET

IN NUR 6 EINFACHEN SCHRITTEN!

1



1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch vor dem Gebrauch.

2



2. Rasurbehandlungsbereich und gut trocknen.

3



3. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die richtige Stärke.

4



4. Legen Sie das Lichtfenster direkt neben die Haut und starten Sie.

5



5. Lassen Sie das Gerät abkühlen vor dem Reinigen des Lichtfensters mit ein Tuch.

6



6. Schmieren Sie den Behandlungsbereich mit einer reichhaltigen Körperlotion ein.